

クールミトン

— 柔らかく冷たい、それは新しい体感 —

冷却剤は凍らせても固まることなく、
しなやかに肌を包みます。
冷却剤と肌の間に空気層を設けることで、
間接的な冷却を可能にしました。



製品の特長

“この製品は医療機器ではありません”

- 基礎研究ではセットで、10℃以下を保ったまま約2時間の連続冷却が可能でした。
- 手袋部分は洗濯が可能ですので、衛生的にご使用頂けます。
- 冷却剤の取り出し、装着は簡単で、準備に手間取ることはありません。

ご使用方法

※詳しくは取扱説明書をご覧ください

- 冷却剤を取り出し、冷凍庫（約-15℃～-20℃）にて12時間以上冷却させて下さい。
（本製品は、冷凍庫で凍らせても固まってしまうことはありません）
- 冷却剤は、必ず手袋内部に入れてご使用下さい。

使用上の注意

- 電子レンジでの加温は絶対に行わないで下さい。
- 冷却剤を先の尖ったもので突き刺すと、中のゲルが漏れ出す恐れがあります。絶対におやめ下さい。

冷却剤をセットする際の注意

- 冷却剤は、白色の内手袋の上下にセットして下さい。
- チャックを閉じる際は、冷却剤の外装フィルムが
噛み込まない様に注意して下さい。

お手入れ方法

- 手袋が汚れてしまった場合、冷却剤を取り出し、
必ず手袋のみを洗濯するようにして下さい。

製品構成材料

手袋 ポリエステル100% **冷却剤カバー** ナイロン/ポリエチレン
冷却剤 カルボキシメチルセルローズ・プロピレングリコール

〈製造元〉 ニッポー株式会社 ME事業部
大阪府大東市氷野2丁目3番7号
TEL：072-870-8866（代表） TEL：072-870-8864（直通）

〈共同研究開発〉

- ※KBCSG-TR（Kinki Breast Cancer Study Group - TR）
- ※大阪大学発バイオベンチャー（株）エバンス

〈販売元〉 株式会社 未来ゲート
〒487-0034
愛知県春日井市白山町8丁目19-1
TEL：0568-53-1721 FAX：0568-53-1722


MASI グループ



保冷手袋時間と温度の関係

2010/9/2

1. 条件：-20℃、24時間冷却
2. 測定日：25℃で測定、平成22年8月12日
3. 測定機体①ニッポー製
②ニッポー製カバーにエラストジェルの冷却体をセット
③エラストジェルグローブ

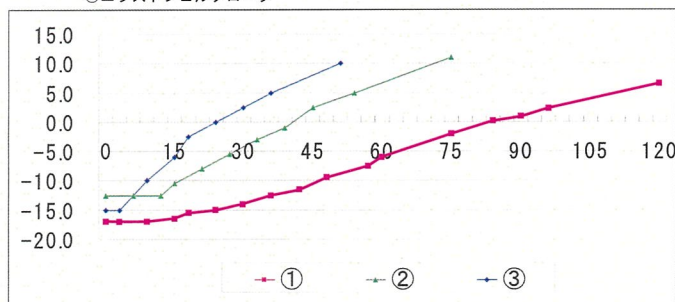

ニッポー株式会社 PFP事業部
杉迫明