

医療用弾性ストッキング
Rfit

レックスフィット

ワンランク上のフィット感と
ファッション性・優れた耐久性
世界のトップブランド

*Medical
Compression
Stockings*

男女兼用

選べるレックスフィット

選べる圧迫タイプ

着用しやすい

薄手・弱圧

15-20mmHg
20-27hPa

しっかり圧迫

薄手・中圧

20-30mmHg
27-40hPa

しっかり圧迫

厚手・中圧

30-40mmHg
40-53hPa

選べる爪先タイプ

爪先あり



爪先を締め付けない
無圧帯加工

爪先なし



通気性の良い
爪先なし

選べる生地タイプ

薄手



肌が透けて見える

厚手



肌が透けて見えない

選べるカラータイプ

ライト
ベージュ

ミディアム
ベージュ

ブラック

レックスフィットサイズ表

ハイソックスとストッキング




※下記のサイズ表に照らし合わせて、正確な品番のストッキングをご使用下さい。

測定部位	サイズ			
	S	M	L	LL
足首周り	18cm～ 20cm	20cm～ 24cm	24cm～ 28cm	28cm～ 32cm
ふくらはぎ周り	26.5cm～ 37cm	29cm～ 39cm	32cm～ 43cm	34.5cm～ 46cm
太腿周り	40.5cm～ 56cm	44.5cm～ 61cm	49.5cm～ 66cm	56cm～ 71cm
足のサイズ	23cm 以下	24.5cm 以下	26cm 以下	28cm 以下

パンティストッキング



※パンティストッキングのサイズを選ぶ場合には、上記のハイソックスとストッキングのサイズ表にてサイズを確認したうえで、下記チャートを参考にサイズをお選びください。

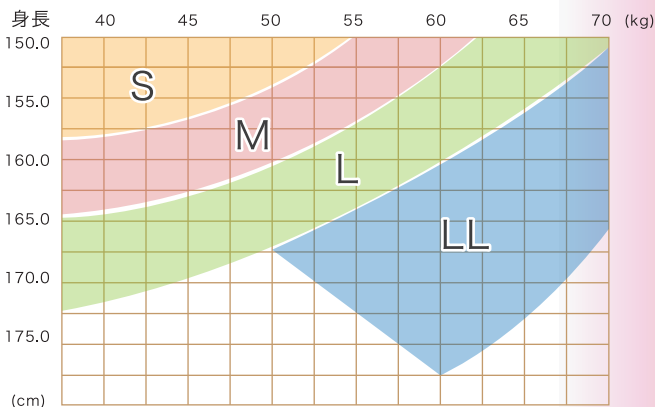



ハイソックス 薄手

中圧

弱圧

肌が透けて見えるストッキング生地

薄



しっかり圧迫 中圧タイプ

薄手ハイソックス 20-30mmHg 27-40hPa						
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ライト ベージュ	あり	1941	1942	1943	1944
		なし	1041	1042	1043	1044
	ミディアム ベージュ	あり	1951	1952	1953	1954
		なし	1051	1052	1053	1054
	ブラック	あり	1911	1912	1913	1914
		なし	1011	1012	1013	1014
価格 (税込価格)			¥ 3,500(¥ 3,780)			

柔らかく履きやすい 弱圧タイプ

薄手ハイソックス 15-20mmHg 20-27hPa						
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
 弱圧	 ライト ベージュ	あり	1921	1922	1923	1924
		なし	1021	1022	1023	1024
	 ブラック	あり	1931	1932	1933	1934
		なし	1031	1032	1033	1034
価格 (税込価格)			¥ 3,200(¥ 3,456)			



ハイソックス厚手 中圧

肌が透けて見えないタイツ生地




厚

しっかり圧迫 中圧タイプ

厚手ハイソックス 30-40mmHg 40-53hPa						
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
 中圧	 ライト ベージュ	あり	1661	1662	1663	1664
		なし	1001	1002	1003	—
	 ブラック	あり	1651	1652	1653	1654
		なし	1101	1102	1103	—
価格 (税込価格)			¥ 3,500(¥ 3,780)			

* 着用後の注意点 *

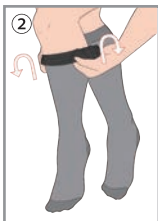

- ① ひざ上まで引っ張り上げ過ぎない
- ② 絶対に折り返して着用しないでください。
- ③ シワができた場合は手で均して伸ばして下さい。



ストッキング薄手

中圧

弱圧

肌が透けて見えるストッキング生地

薄



しっかり圧迫 中圧タイプ

薄手ストッキング

20-30mmHg 27-40hPa

※ズレ落ち防止シリコン付きレース加工

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
 中圧	 ライト ベージュ	あり	2731	2732	2733	2734
	 ミディウム ベージュ		2751	2752	2753	2754
	 ブラック		2711	2712	2713	2714
価格 (税込価格)			¥ 4,300(¥ 4,644)			

NEW!

薄手ストッキング

20-30mmHg 27-40hPa

※ズレ落ち防止シリコン付きレース加工

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ライト ベージュ	なし	2701	2702	2703	2704
価格 (税込価格)			¥ 4,500(¥ 4,860)			

柔らかく履きやすい 弱圧タイプ

NEW!

薄手ストッキング

15-20mmHg 20-27hPa

※ズレ落ち防止シリコン付きレース加工

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
弱圧	ライト ベージュ	なし	2301	2302	2303	2304
価格 (税込価格)			¥ 4,000(¥ 4,320)			



ストッキング 厚手

中圧

肌が透けて見えないタイツ生地



厚

しっかり圧迫 中圧タイプ

厚手ストッキング

30-40mmHg 40-53hPa

※ズレ落ち防止シリコン付きバンド加工

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ベージュ	あり	2611	2612	2613	2614
	ブラック		2641	2642	2643	2644
価格 (税込価格)			¥ 4,800(¥ 5,184)			

厚手ストッキング

30-40mmHg 40-53hPa

※ブレンタイプ (シリコン加工なし)

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
	ベージュ	なし	1201	1202	1203	1204
	ブラック		1251	1252	1253	1254
価格 (税込価格)			¥ 4,200(¥ 4,536)			

レックスフィット専用ガーターベルト…… ¥1,620(税込)

M…60~80cm(商品番号1687) L…75~105cm(商品番号1688)

お手入れ方法

長くご使用頂く為に

*家庭用洗剤で手洗いして下さい。洗濯機をご利用の際は必ずネットに入れて洗濯して下さい。

*タオル等につつまみ水気を取ったあと、陰干しして下さい。

*漂白剤、柔軟剤、乾燥機、アイロン等は繊維を傷めますので使用しないで下さい。



パンティストッキング **薄手**

中圧

弱圧

肌が透けて見えるストッキング生地

薄



しっかり圧迫 **中圧タイプ**

薄手パンティストッキング			20-30mmHg 27-40hPa			
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
	 ライト ベージュ	あり	1731	1732	1733	1734
	 ミディアム ベージュ		1751	1752	1753	1754
	 ブラック		1711	1712	1713	1714
価格 (税込価格)			¥ 4,800(¥ 5,184)			

柔らかく履きやすい **弱圧タイプ**

NEW!

薄手パンティストッキング 15-20mmHg 20-27hPa						
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
弱圧	ライトベージュ	あり	1311	1313	1315	1317
	ブラック		1391	1392	1393	1394
価格 (税込価格)			¥ 4,000(¥ 4,320)			



パンティストッキング **厚手** 中圧

肌が透けて見えないタイツ生地



しっかり圧迫 **中圧タイプ**

厚手パンティストッキング 30-40mmHg 40-53hPa						
圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ライオンベージュ	あり	1631	1632	1633	1634
	ブラック		1641	1642	1643	1644
価格 (税込価格)			¥ 5,300(¥ 5,724)			



*** 交換時期 ***

2〜3 足を交互に使用した場合、約 6 ヶ月を目安に新しい物への交換をお勧め致します。
(圧迫感が弱くなる可能性がある為)



ハイソックス 男性向き

中圧

ビジネスソックスリブ編み生地 ※女性の方も着用可能です。



しっかり圧迫 **中圧タイプ**



男性向きハイソックス

20-30mmHg 27-40hPa

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ブラック	あり	1811	1812	1813	1814
価格 (税込価格)			¥ 3,500(¥ 3,780)			

男性向きハイソックス専用サイズ表

測定部位	サイズ			
	S	M	L	LL
足首周り	18cm~21cm	21~25cm	25~29cm	29~33cm
ふくらはぎ周り	28cm~38cm	30~42cm	32~46cm	34~50cm
足のサイズ	25cm 以下	25.5~27.5cm	28~29.5cm	29.5cm 以上



男性レオタード前アキタイプ

中圧

タイツ風クールなブラック



しっかり圧迫 **中圧タイプ**



男性用レオタード (前アキタイプ)

20-30mmHg 27-40hPa

圧迫	カラー	爪先	S	M	L	LL
中圧	ブラック	あり	9801	9802	9803	9804
価格 (税込価格)			¥ 8,000(¥ 8,640)			

男性レオタード専用サイズ表

測定部位	サイズ			
	S	M	L	LL
身長	~168cm	~173cm	~181cm	~188cm
ウエスト	~76cm	~83cm	~91cm	~101cm

弾性ストッキングの上手な履き方

△注意△

弾性ストッキングは足首周りが一番圧迫が強くなっております。普通の靴下を履くようにたくしあげると硬くて履けません。下図を参考に着用して下さい。

悪い例



1



ストッキングの中に手を入れます。

2



かかとの部分を内側から軽くつまみます。

3



かかとをつまんだまま裏返し、ひっくり返します。

4



つまんだかかと部分まで裏返します。

5



つまんだ手を離し、入口を広げます。

6



つま先から挿入します。

7



かかとの方へ履いていきます。

8



かかとをストッキングのかかと部分に正確に合わせます。

9



シワや重なりができないようゆっくり引き上げます。

弾性ストッキングは普通のストッキング(靴下)に比べ、足首周りを中心に強い圧迫がかかるように作られております。慣れるまでは履きづらいと思いますが、履き方を覚えて正しい着用方法で履いて下さい。

※使用中、皮膚に異常があった場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。

Vol.7

医療用弾性ストッキング専門メーカー



Best Customer Service

LimFix

株式会社リムフィックス

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目3番12号 ケイズビルディング4F

TEL:03-3818-8494 FAX:03-3818-8495 URL:<http://www.limfix.com/>

一般医療機器/製造販売許可番号13B3X90009000001